


ÁCIDOS NUCLEICOS: CARACTERIZACIÓN

I. EFECTO HIPERCROMICO

SOLUCIÓN A
3 mL

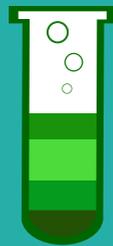

Calentar a 75°C
por 15 minutos


Enfriar rápidamente
en baño de hielo por 15 minutos

Medir
Abs a 260 nm

Comparar con dato
Inicial de Abs a 260nm

II. PRUEBA DE FOSFATOS

SOLUCIÓN A
3,0 mL

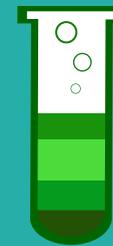

1 mL de ácido
molíbdico

Reposo por 5 minutos

1 mL de ácido
ascórbico

Calentar por 5 minutos
Observar